

# みるみる伸ばそう、みる力



ジェイキッズは「子どもの目を見守る」ネットワークをつくります。

治療用こどもメガネ  
ジェイキッズ

全国発売開始!

こどもの

## 目を守る7つ道具

- 早期発見の診断
  - こどもに合った治療計画
  - 保護者の励まし
  - こどものやる気
  - 治療用メガネ
  - 眼鏡専門店のサポート
  - 発育する喜び
- 未来ある子供たちの弱視斜視治療を見守るために、保護者の皆様、眼科専門医の先生方、視能訓練士様をはじめ眼科スタッフ、フレームメーカー、メガネ専門店が一体となってチームを組もう!という理念のもと、このたびジェイキッズの全国発売を開始することとなりました。



こども用メガネ  
良いのはどっち?  
プラスチック製 or 金属製



近年、人気のある子供プラスチック製フレームと定番の金属製フレーム。よくある質問、「治療用メガネは樹脂製とメタル製、どちらが良いのか?」にお答えしたいと思います。もちろん、双方とも、「きちんと高品質が保たれているブランドに限って」比較することとなります。長所と短所をまとめましたので、参考にしてみてください。

○ 長所 × 短所 △ 長所と短所

### プラスチック製フレーム T社製品

- 柔軟な樹脂製であるため、寝返りをうっても破損しない。Good!
- 調整がほぼ不要。というより調整しようがない。
- 鼻パット、丁番ネジの破損が多い。
- レンズが外れやすい。

### 金属製フレーム ジェイキッズ

- 耐久性があり、長期間使用可能。Good!
- 度重なるレンズ交換にも耐えられる。
- 顔の形状に対応するフィッティングが可能。Good!
- 優れた設計で強い。
- 度重なる調整にも耐えられる。
- 寝返り、打撃などに弱い

### こどもの成長に合わせたフレーム選択をオススメします。

4~5歳くらいまでのお子様には、樹脂製フレームも宜しいかと思えます。ただし小学校入学後は、メガネの取扱いがしっかりできる世代であり、お子様に合わせたフィッティングができるメタル製フレームが最善ではないか、と考えております。



JKIDS  
15年愛され続けている  
ジャムコン定番のこどもメガネ

### 鯖江で70年の実績

ジェイキッズは、ジャムコンさんオリジナルフレームとして、長年に渡って各眼科様から様々なご評価を頂戴し、育てて頂いたブランドです。この貴重な経験を活かし、少しでも眼科医療のお役にたてる製品作りが出来れば幸いに存じます。この10年間、中国製品に押されてきた日本製ですが、近年では鯖江国産メガネの品質が大きく見直されてきております。ぜひ一度、国産フレームの品質の高さ、繰り返し調整に耐えうるメタルフレームの良さについて、ご評価賜りますようお願い申し上げます。

■製造発売元：オリエント眼鏡(株)  
梅田将臣専務



お問い合わせ先  
株式会社ジャムコン眼鏡事業部  
〒815-0032 福岡市南区塩原1丁目28-23  
TEL 092-554-7600



永らく、ジャムコンオリジナルのキッズ専用フレーム「ジェイキッズ」が、多くの眼科様のご評価を頂き、いよいよ全国発売されることとなりました。二〇一七年一〇月より、

**全国のメガネ専門店、眼科併設メガネ販売店より  
ご注文頂けるようになります。**（※製造発売元…オリエント眼鏡株式会社）

こどもメガネで大切なこと

## 治療用、という認識

メガネ販売店は、実はお子様の弱視治療について詳しくご存じのお店が少ない、というのが現状です。格安プライス店が市場の多くを占めるようになった現在、店頭に並ぶ商品の低品質化、店員さんの知識技術の低下は嘆かわしいものがあるといわれております。

一方で、3歳児健診時に眼科検査をさらにしっかりと行い、「眼科に行かずに弱視が見逃されている現状」を無くさねばならないという声もあり、弱視の早期発見と、その後の弱視治療をしっかりと支える存在でありたいと考えております。

未来ある子供たちの弱視斜視治療を見守るために、保護者の皆様、眼科専門医の先生方、視能訓練士様をはじめ眼科スタッフ、フレームメーカー、メガネ専門店が一体となってチームを組もう！という理念のもと、このたびジェイキッズの全国発売を開始することとなりました。

繰り返しのフィッティングに耐える

# 「こども」と「視力の成長」を科学した眼鏡。

### 全て良品質のチタン素材β-Titanium

バネ性があり、体に優しい良品質のβ-titaniumを主なパーツに使用しています。

### しなるフレームにも強く密着する高機能な塗装

内側は密着性に優れた柔らか塗料、外側は摩擦に強い5H強度の極薄セラミック層になった高機能なカラー塗装をしています。  
※ハイブリッドセラミックカラー（特許取得塗装使用）

### 強度のある1.5ミリ厚

テンプル側の一枚コマ厚が従来品は1ミリでしたが、1.5ミリまで厚みを増し強度を上げました。

### 素材の良さを活かした設計

厚みと、しなやかさのバランスを両立させた独自の設計です。

### 柔らかシリコンパッドを採用

ソフトな装着感で滑りにくく、フレームのズレ防止にも効果があります。

### 鯖江の技術が生んだ、丈夫な丁番

ヨロイ・テンプル共に、スパルタ丁番です。ロー付けタイプの丁番ではないのでロー離れの心配がなく、丈夫です。

### テンプル長さ調整可能

テンプルが長い場合、芯先をカットすることにより最短10ミリまで調整可能です。

### 丸みのある形状

丁番内側の丸みのある形状+テンプルの角も丁寧に処理し安全性を考慮しています。

### 壊れにくいブリッジ

リムの裏側から側面にロー付けをしています。ロー付け面積を増やすことにより、ロー離れしにくいブリッジを採用しました。



デザイン性と丁寧な仕上げ処理

度重なるレンズ交換にも耐えられる強度

顔の形状に対応するフィッティングが可能

## 現場の意見を製品に

この度ジェイキッズが、全国のメガネ専門店に供給させて頂けるようになったことは、たいへん光栄に存じます。

当店はジャムコン直営店の中でもほぼ唯一のお子様の治療用眼鏡メインの販売となっている店舗ですが、毎日多くの保護者様と小児患者様がお来店され、毎日60組近く調整でお立ち寄り頂いております。

弱視治療中のお子様は動きもたいへん活発です。激しく変形させている事例が多く、中には破損させて来られる事例も少なくありません。これは販売店としての悩みとも言えます。はるかご遠方からのご来店も多いので、とにかく修理が必要になるなどの破損を起こしにくいフレーム、度重なる調整に耐えうるフレームを販売したいという心がけております。特に調整については、お子様のフィッティングは先ゼ

ルの曲げやクリングスの曲げ方にも工夫しており、通常の大人用フレームとは、全く違うフィッティングだと言われる事が多く、それだけフレームにも繰り返し強い力の負担をかけております。破損・変形事例としては、


- ①クリングスが根元から折れる（耐久性）
- ②左右のヨロイが大きく開いて変形してしまっている（強度不足+力を逃がしきれない）

の2点が最も多く発生しています。これは、そのフレームの設計や素材など、製造元がどれだけ良いものを作ってくれるかによって発生率や変形の程度が大きく異なります。ジェイキッズのモデルチェンジに際しては、10年近くにわたり、私ども現場としての意見を開發段階で採用してもらうようにしてきました。現在では、市場で流通している様々な子供メガネブランドの中でも、販売後の不安が少ない商品として、自信を持って販売しております。

ヨロイ（智）を例にとれば、耐久性を上げようと思えば硬く強い部品を採用すれば良いのですが、硬すぎれば女性が調整する際は容易に曲げられなくなってしまいます。また、大人用では想定もしなかった破損、ブリッジ部のロー離れなどにも気を配りたいところです。

販売調整に従事される方にも配慮されたフレームづくりには、こうしたバランスが非常に重要だと、つくづく痛感しております。

ぜひ一度、ご評価のほど、お願い申し上げます。ご次第でございます。

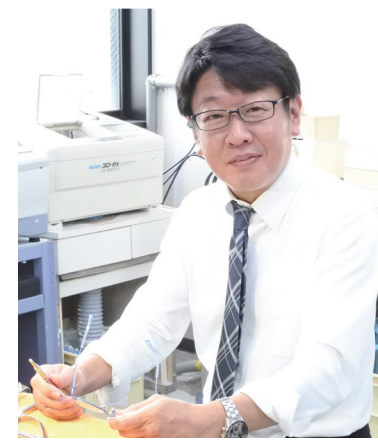

■技術監修：メルック門司店 店長 桑原栄作